

Sengesensor



ANVENDELSE

Forebyggelse af fald fra seng og alarmering ved forladt seng. Anvendes hos borgere, som er i risiko for at falde ud af sengen, eller hvor der ønskes alarm, hvis borgeren forlader sengen.

ALARMERING


- Hvis borger sætter sig op i seng eller forlader seng.
- Alarm aktiveres via IntelligentCARE app, hvor der er mulighed for at foretage individuelle alarmindstillinger for den enkelte borger, eksempelvis at alarmen skal være aktiveret i et bestemt tidsinterval.
- Alarm ved lavt batteri.

MONTERING

Sensoren monteres på væggen på medfølgende vægbeslag, eller på et sengebeslag som kan tilkøbes. Sensoren monteres minimum 60 cm over hovedgærdet i soveposition. Sengebeslaget kan justes op og ned i forhold til sengegavlen.

NETVÆRK

Sengesensoren kommunikerer trådløst med IntelligentCARE gateway/netværk.

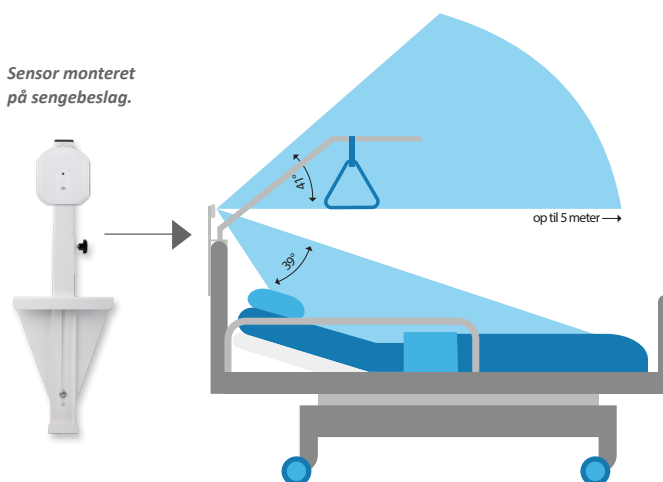

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------|---|
| Varenummer | ICM19007 |
| Netværk | Zigbee, trådløse kommunikationsstandard |
| Batteritype | AA standard batteri x 2 |
| Driftstemperatur | 0 ° - 45° C |
| IP-klassifisering | IP40 |
| Dimensioner | 91 x 107 x 33 mm |