

## Sengesensor til hospitaler

(Med tænd/sluk knap)

PRODUKTARK

### ANVENDELSE

Anvendes hos patienter som er i risiko for at falde, hvis de forlader sengen. Reducerer behovet for FADL vagter til overvågning.

### ALARMERING


- Hvis patient sætter sig op i seng.
- Hvis patient forlader seng.
- Alarm aktiveres via tænd/sluk knappen på sensoren, hvilket gør den hurtig og nem at betjene for plejepersonalet.
- Alarm ved lavt batteri.

### MONTERING

Sensoren monteres på et sengebeslag, som kan justeres op og ned i højden, i forhold til sengegavle. Sengebeslaget monteres ved fodenden, og justeres så sensoren er minimum 60 cm over fodende kanten.

### NETVÆRK

Sengesensoren kommunikerer trådløst med Intelligent-CARE gateway/netværk.

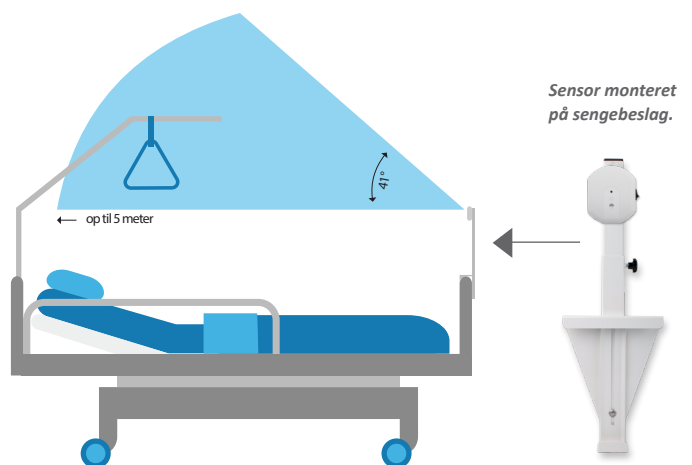

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM19008
Netværk	Zigbee, trådløse kommunikationsstandard
Batteritype	AA standard batteri x 2
Driftstemperatur	0 ° - 45° C
IP-klassifisering	IP40
Dimensioner	91 x 107 x 33 mm

Version 01

### ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING. SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com