

Sengesensor til institutioner

(AT-ZIG-BED-STD)

ANVENDELSE

Forebyggelse af fald fra seng og alarmering ved forladt seng. Anvendes hos borgere, som er i risiko for at falde ud af sengen, eller hvor der ønskes alarm, hvis borgeren forlader sengen.

ALARMERING


- Hvis borger sætter sig op i seng eller forlader seng.
- Alarm aktiveres via IntelligentCARE app, hvor der er mulighed for at foretage individuelle alarmindstillinger for den enkelte borger, eksempelvis at alarmen skal være aktiveret i et bestemt tidsinterval.
- Alarm ved lavt batteri.

MONTERING

Sensoren monteres på væggen på medfølgende vægbeslag, eller på et sengebeslag som kan tilkøbes. Sensoren monteres minimum 60 cm over hovedgærdet i soveposition. Sengebeslaget kan justes op og ned i højden i forhold til sengegavlen.

NETVÆRK

Sengesensoren kommunikerer trådløst med IntelligentCARE gateway/netværk.

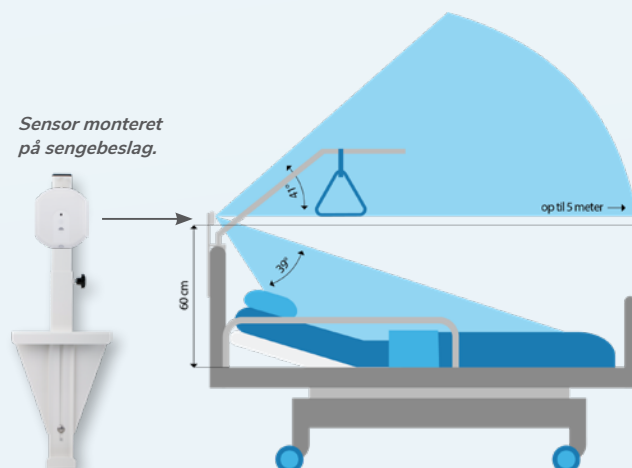

SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM19007
Netværk	Zigbee, trådløse kommunikationsstandard
Batteritype	2 x AA standard batteri
Driftstemperatur	0° til +45° C
IP-klassifisering	IP40
Dimensioner	91 x 107 x 33 mm